


Aufbauanleitung für Ihren medivato Hausnotruf:



Schritt 1:

Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.

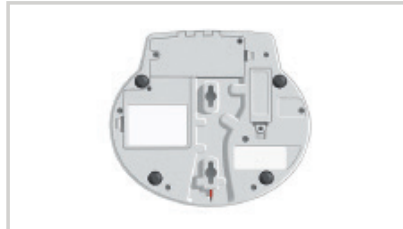

Schritt 2:

Öffnen Sie die mit dem roten Punkt gekennzeichnete Abdeckung auf der Rückseite der Basisstation. Dies funktioniert wie das Öffnen des Batteriefachs für eine Fernbedienung.




Schritt 3:

Die Aktivierung Ihrer Notrufflösung erfolgt durch das Einsetzen der SIM-Karte.

Schieben Sie die vorbereitete SIM-Karte durch einen leichten Druck in den Spalt, bis diese einrastet.



Schritt 4:

Auf der Vorderseite der Basisstation startet nun die Statuslampe  dauerhaft grün zu leuchten. Sobald die Kontrollleuchte mit dem Ausrufezeichen nach ungefähr 3 Minuten das Blinken beendet, ist der Hausnotruf betriebsbereit und der Testnotruf kann ausgelöst werden.



Schritt 5:

Lösen Sie jetzt einen Alarm über Ihren Handsender aus, Ihre Hausnotrufzentrale meldet sich dann über den Lautsprecher der Basisstation bei Ihnen.

Bitte teilen Sie der Zentrale mit, dass es sich hierbei um einen Testnotruf handelt.

Probleme bei der Installierung ?

Treten Probleme während oder nach der Installierung auf, stehen wir Ihnen natürlich für Ihr persönliches Anliegen zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch von Montags bis Freitags zwischen 09 Uhr und 17 Uhr unter der Rufnummer 040 655 833 77 sowie per E-mail unter service@medivato.de.