

## Aufbauanleitung für Ihren medivato Hausnotruf Classic:




### Schritt 1:

Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose


#### Optional:

Verbinden Sie das Netzkabel mit Ihrem Router, um damit den Hausnotruf sicherer zu machen

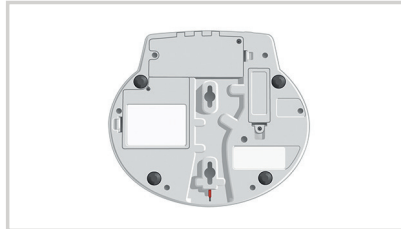

### Schritt 2:

Drehen Sie die Basisstation auf die Rückseite. Neben dem auf der Rückseite aufgeklebten roten Punkt befindet sich der Hebel zum Abnehmen der Gehäuseabdeckung. Dies funktioniert wie das Öffnen des Batteriefachs für eine Fernbedienung.

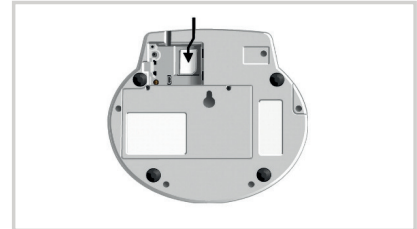

### Schritt 3:

Nach dem Öffnen sehen Sie, wo das Kabel in das Gerät geht. Direkt neben dem Kabel befindet sich ein kleiner schwarzer Schalter. Schieben Sie diesen Schalter mit dem Finger in Richtung des Kabels.



### Schritt 4:

Wenn Sie die Basisstation jetzt wieder auf die Vorderseite drehen, sollten einige Lampen angefangen haben zu leuchten. Sobald die Leuchte mit dem Pluszeichen aufhört, zu leuchten, ist der Hausnotruf betriebsbereit und der Testruf kann ausgelöst werden.



### Schritt 5:

Sie können einen Testruf über das Funkarmband auslösen. Sobald Sie die Bandansage „Alarm Handsender“ hören, wird die Freisprechverbindung zur Hausnotrufzentrale aufgebaut. Das dauert ca. 40 Sekunden. Wenn sich die Zentrale bei Ihnen meldet, teilen Sie mit, dass es sich um einen Testruf handelt.

## Der Abbau Ihres medivato Hausnotrufes:

Es genügt nicht, nur den Stecker aus der Steckdose zu ziehen! **Der Hausnotruf ist mit einem Akku und einer SIM-Karte ausgestattet. Somit kann es während des Transportes zu Fehlalarmen kommen.** Nutzen Sie bitte die oben genannten Erklärungen, um das Gerät auszuschalten. Der Hausnotruf ist ausgeschaltet, wenn auf der Vorderseite alle Leuchten aus sind.