

# medivato Notrufsystem Classic

Diese Anleitung dient Ihrer Sicherheit.  
Bitte aufmerksam durchlesen!

Ihr persönlicher  
Hausnotruf  
—  
Produktanleitung



Aufbauanleitung | Umbauanleitung | Nützliche Funktionen

# Inhaltsverzeichnis

Inhalt des Leistungspaketes.....	3
Aufbauanleitung .....	4
Umbauanleitung .....	6
Testnotruf .....	8
Symbole & Anzeigen.....	10
Verwendung im Alltag .....	12
Rückgabe & Versand.....	14
Technische Daten .....	16
EEU-Konformitätserklärung.....	17
Impressum.....	18

# Inhalt des Leistungspaketes

medivato Hausnotrufsystem – Classic



1x Basisgerät  
inkl. Netzteil



1x Funkauslöser



1x Arm & Halskette

\*Gerätetyp, Optik und Färbung können abweichen.

# Aufbauanleitung

**Probleme bei der Installation?**  
Sie erreichen uns Montags bis Freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer: 040 665 833 77 oder per E-Mail: [service@medivato.de](mailto:service@medivato.de)



## Schritt 1

Suchen Sie sich einen geeigneten Ort für Ihr Hausnotruf und verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.

Wählen Sie den Platz nach folgenden Kriterien:


- bestmöglicher Mobilfunkempfang
- Zentrale Stelle Ihres Zuhauses



## Schritt 2

Öffnen Sie die mit dem roten Punkt gekennzeichnete Abdeckung auf der Rückseite der Basisstation.

Die Aktivierung Ihrer Hausnotrufflösung erfolgt durch das Einsetzen der SIM-Karte. Schieben Sie die voreingesezte Karte durch einen leichten Druck in den Spalt, bis diese einrastet.

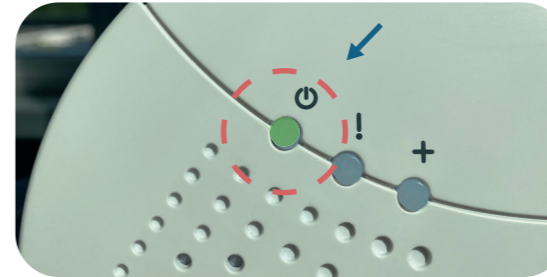

## Schritt 3

Nun beginnt die Einschaltleuchte, auf der Vorderseite der Basisstation, dauerhaft grün zu leuchten.

Sobald die Kontrollleuchte (Ausrufezeichen) nach circa 3 Minuten das Blinken beendet, ist Ihr Hausnotruf betriebsbereit.



## Schritt 4

Lösen Sie jetzt einen Testnotruf über Ihren Funkarmband oder Ihrer Basisstation aus: Ihre Hausnotrufzentrale meldet sich daraufhin über den Lautsprecher der Basisstation bei Ihnen.

Bitte teilen Sie der Zentrale mit, dass es sich hierbei um einen Testnotruf handelt.

# Umbauanleitung

Kurzanleitung von Armband zu Halskette

1.




Funkauslöser

2.



Halterung Funkauslöser

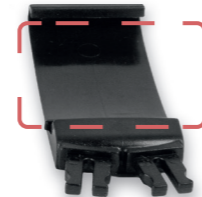

3.



Halskette



Verschluss  
Funkauslöser

Funkarmband



Verschluss  
Armband

## Anleitung

Sie erhalten Ihren Funkauslöser als fertig zusammengebautes Funkarmband. Selbstverständlich können Sie das Armband zu einer Halskette umfunktionieren.

1.

Hierfür öffnen Sie den Verschluss (1) des Funkarmbands und ziehen das Funkarmband aus der Öffnung des Funkauslösers, bis der Funkauslöser von dem Funkarmband separiert ist.

2.

Jetzt drücken Sie den Funkauslöser leicht in die Halterung des Funkauslöser, bis dieser einrastet und klickt (2).

3.

Nun stecken Sie die Enden der Halskette (3) in die Verschlüsse der Funkauslöser Halterung.

Auf der folgenden Seite zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Testnotruf auslösen.

# Testnotruf

## Regelmäßiger Testnotruf

Führen Sie bitte mindestens 1x pro Monat einen Testnotruf durch. Durch die regelmäßige Überprüfung stellen Sie die Funktion Ihrer Hausnotrufösung sicher und bleiben in Übung, falls Sie einen echten Notruf aussenden müssen.



Bei Aktivierung sendet das Basisgerät einen Notruf an die Notrufzentrale, um Hilfe zu holen.

**Wichtig!**  
Geben Sie bitte unbedingt an, dass es sich um einen Testnotruf handelt!

## Der Notruf kann wie folgt ausgelöst werden:

1. Durch das Drücken der roten Taste auf dem Basisgerät.
2. Durch das Drücken der Alarmtaste auf dem Funkarmband.

## Wichtige Zusatzinformationen

Hinterlegen Sie Ihren persönlichen Notfallplan mit wichtigen Zusatzinformationen, damit die Rettungskräfte direkt wissen, was bei Ihrer Gesundheit zu berücksichtigen ist und wie Sie im Notfall bestmöglich versorgt werden können.



# Symbole & Anzeige



## medivato Basisstation Auskunft

Anzeigeleuchten	Signal	Bedeutung
Alarmtaste	Leuchtet rot Blinkt rot	Alarmfunktion aktiviert Alarm ist aktiviert
Einschaltungstaste	Aus Leuchtet grün Blinkt grün	Gerät ist ausgeschaltet Gerät ist im Betrieb Stromversorgung ist unterbrochen
Kontrollleuchte	Aus Blinkt rot	Normaler Betrieb Verbindungsaufbau
Statuslampe	Aus Leuchtet abwechselnd rot und grün	Normaler Betrieb Alarm ist aktiviert

# Verwendung im Alltag

## Funkarmband

### Das Funkarmband für maximale Sicherheit

Tragen Sie Ihren Funkauslöser mit dem dazugehörigen Armband oder der Halskette, immer bei sich – zu Hause, auf Ihrem Balkon oder wenn Sie in Ihren Garten gehen.

So stellen Sie sicher, dass Sie Ihren persönlichen Schutzengel immer zur Hand haben, falls Ihnen außerhalb Ihrer eigenen vier Wände etwas zustößt.

- **Funkbereich Reichweite**  
Innenräume:  $\geq 40\text{m}$   
Außenbereiche:  $\geq 300\text{m}^*$

\*Funkbereich wird durch die Bauweise beeinflusst u. a. Wände, Fenster.



### Hilfe auf Knopfdruck

Die LED am Funkauslöser leuchtet sobald der Notruf aktiviert wurde und ändert die Farbe sobald das Signal von Ihrer Hausnotruflösung empfangen wurde.

Vom Sofa aus, in der Küche oder aus der Dusche – jetzt können Sie im Alltag jederzeit per Knopfdruck Hilfe anfordern, ohne sich auch nur im Geringsten in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken zu müssen.

So wird Ihre Sicherheit beim Tragen des Funkarmbands zu jeder Zeit gewährleistet.

\*Akku-Lebensdauer laut Hersteller ca. 3 Jahre.  
Der Akkutausch erfolgt durch die Notrufzentrale.



# Rückgabe & Versand

## Anleitung zur Rücksendung

Probleme bei der Rückgabe?

Sie erreichen uns Montags bis Freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer: 040 665 833 77 oder per E-Mail: [service@medivato.de](mailto:service@medivato.de)



### Schritt 1

Entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite Ihrer Notruflösung.

Deaktivieren Sie anschließend das Gerät durch einen sachten Druck gegen die SIM-Karte, so dass diese ausrastet. Bitte legen Sie die Ware mit der Originalverpackung in das Paket.

### Schritt 2

Bitte tragen Sie den Grund Ihrer Rücksendung in den Retourenschein und legen diesen in das Paket.

Der Retourenschein befindet sich in Ihrem Paket in der medivato A5 Mappe.

### Schritt 3

Überkleben Sie den Paketaufkleber der Originalverpackung mit dem beigefügten Retourenlabel.

Der Retourenschein befindet sich in Ihrem Paket in der medivato A5 Mappe.

### Schritt 4

Bringen Sie das Paket zu einer Postfiliale der Deutschen Post/DHL.

Das Frankieren der Sendung ist nicht notwendig. Die Rücksendung ist für Sie kostenfrei.

# Technische Daten

## Notrufsystem Classic

Maße:	200 mm x 175 mm x 35 mm
Stromversorgung:	Netzteil 230 VAC/5 VDC 1,0 A. Modellnr. SDB0501000P
Stromverbrauch:	2W (Nennwert)
Reserve-Akku:	3.7 V Li-Ion, Art.-Nr.: 300163, Zellenmodell: BK514461AR
Reservezeit:	Akkubetrieb bis zu 120 Stunden
Kommunikation:	GSM-/GPRS-Dualband 900/1800 MHz
Funkfrequenzbereich:	869,2125 MHz
Funkempfängerklasse:	1
Anzahl von Funksendern:	Max. 10
SIM-Karten-Schnittstelle:	1,8 V und 3 V
Geräteklasse:	Klasse 1 Funkgerät

## Funkempfängerparameter

Max. nutzbare Empfindlichkeit:	-113 dBm
Durchschnittlich nutzbare Empfindlichkeit:	ver: 28,7 dBuV/m, hor: 27,0 dBuV/m
Nachbarkanalselektivität:	-26,2 dBm/-28,2 dBm
Interkanalmodulationsfestigkeit:	-36 dBm/-37 dBm

## Umgebung

Das Produkt Notrufsystem Classic von medivato ist für die Nutzung in Innenräumen in einem normalen Wohnumfeld bestimmt.

Temperatur:	Betriebstemperatur 5° C (41° F) bis 35° C (95° F)
Feuchtigkeit:	0% bis 75% relative Feuchtigkeit (nicht kondensiert)
Umweltklasse:	1 (EG-I)

# EEU-Konformitätserklärung

## EEU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt medivato, dass der Funkanlagentyp der folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/ EU.

## Produktinformationen & Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist Teil eines Hausnotrufsystems, das im Notfall, oder wenn Hilfe benötigt wird, einen Hilferuf absetzt.

Frequenzbereich:	869,200-869,250 MHz
Hochfrequenzleistung:	Max. 10 mW (10 dBm)

Das Gerät ist wasserdicht zur Verwendung in Dusche oder Badewanne (IP67). Der Austausch der Batterien darf nur von autorisierten Personen erfolgen. Das medivato Hausnotrufsystem Classic und der Alarmauslöser sollten mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden, Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

## Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen aus den EU-Richtlinien 2006/66/EG (Batterien) und 2012/19/EU (WEEE) und darf nicht in den Hausmüll gegeben werden.

Führen Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets dem Recycling bei den zuständigen Sammelstellen zu.

# Impressum

medivato AG  
Zirkusweg 2  
20359 Hamburg

Vertretungsberechtigter Vorstand:  
Patrick Woyke

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Matthias Witt

## Kontakt

Montags bis Freitags  
09:00 Uhr – 17:00 Uhr

Telefon: +49 (40) 655 833 77  
Telefax: +49 (40) 655 833 78  
E-Mail: [service@medivato.de](mailto:service@medivato.de)



Wir sind für Sie da.  
E-Mail: [service@medivato.de](mailto:service@medivato.de) | Telefon +49 (40) 655 833 77  
Besuchen Sie uns auf [www.medivato.de](http://www.medivato.de)